




Funciones

- 15 a 20 % más pequeño
- Mejor comodidad de los pacientes
- Cerámique transparente, alúmina policristalina pura
- Partículas delgadas
- Imitación dental perfecta
- Sin coloración del soporte
- Muesca de fácil desunión

Hi Aesthetic

Chíc. mini

Revolución estética - Mini Cerámico

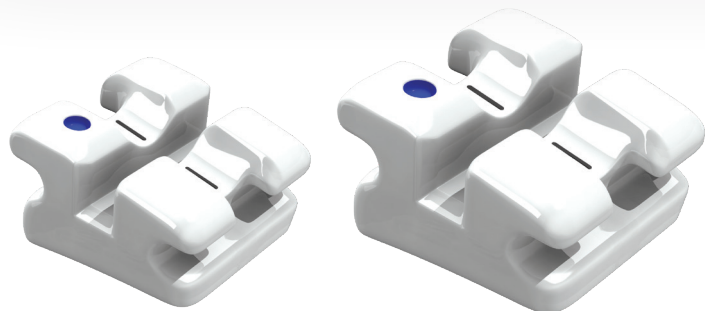


GC

Experts in Orthodontics




Chic. mini

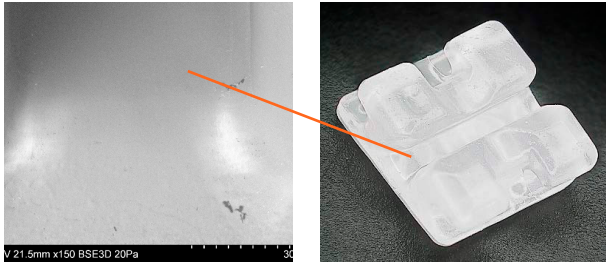


Baja fricción

Las partes biseladas de la ranura se inyectan en una sola pieza, no hay contratiempo debido a la unión del molde. Además, el arco de alambre se desliza suavemente gracias al proceso de pulido.

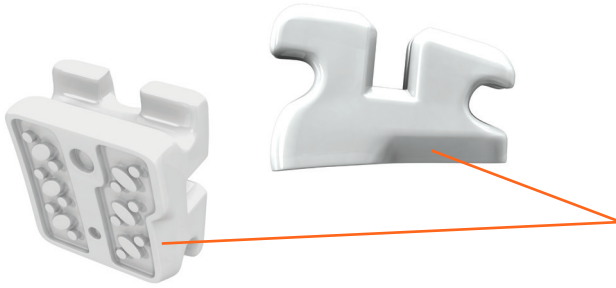

Fácil despegado

Con su muesca preformada en la base, Chic. MINI se despegaba de forma segura sin alterar la fuerza de unión tan eficazmente como en un soporte de tamaño normal.

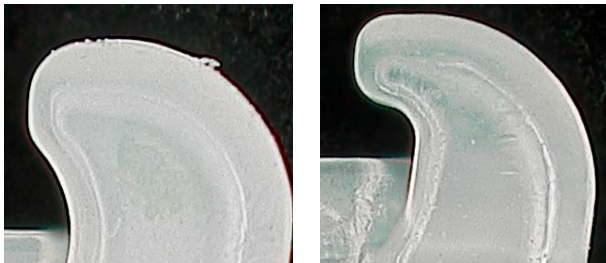

Nuevo Gancho diseñado

Esta nueva forma de gancho garantiza una perfecta retención de cadena o elástico.



Mini Tamaño

Este nuevo diseño, en los incisivos inferiores, aumenta el espacio entre soportes, facilitando así la inserción del arco en la primera cita, en casos de apiñamiento severo.

Combinación de soportes

Puedes usar Chic. mini en la parte superior con soportes Legend Rhodium en la parte inferior. Combinado con arcos de rodio para un resultado estético completo.



CHIC mini es fabricado por TOMY Inc. en Yumoto, Japón. Los ortodontistas de todo el mundo han usado y adorado los brackets TOMY desde su primer sistema de brackets lanzado en Diciembre de 1961. A partir de hoy, TOMY ha crecido hasta convertirse en uno de los fabricantes de soportes más respetados del mundo.



99-15ET-1300 · Rev00 - 07.2022



GC Orthodontic of America

3737 W 127th Street Alsip, IL, 60803 United States

1-888-332-4883

gcoainfo@gc.dental